


# BD Veritor 검사 키트를 사용하여 가정에서 신속한 코로나19 검사를 자체 실시합니다.

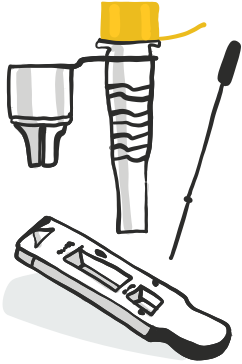

## 검사 키트

- 코 면봉
- 소량의 투명한 액체가 있는 시험관
- 검사 카트리지

## 준비물:

- 깨끗하고 평평한 표면
- 종이 타월
- 손 세정제
- 타이머 또는 시계



## 사전 준비 사항

- 손을 씻습니다.
- 깨끗하고 평평한 표면에 종이 타월을 깔습니다.
- 검사 키트의 내용물을 엽니다.
- 포장지에서 검사 카트리지를 분리합니다.
- 여러 사람을 검사한다면 카트리지에 마커나 연필로 이름을 씁니다.
- 이 QR 코드를 스캔하여 안내 동영상을 보세요.

<https://backtoschool.ednet.ns.ca/kidcovidtest>

**1** 콧구멍에 약 2cm 정도로 면봉을 넣습니다. 면봉을 5회 세게 문질러 돌리고 다른 콧구멍에도 반복합니다(눈에 물이 고일 수 있음).

**2** 시험관을 가볍게 두드려 바닥으로 액체를 가져옵니다. 액체가 튀거나 액체에 닿지 않도록 주의하면서 노란색 캡을 조심스럽게 제거합니다.

**3** 부드럽게 면봉 끝을 액체에 넣고 15초 동안 위아래로 젖습니다. 남은 액체를 짜내기 위해 면봉 주위의 튜브를 조입니다. 면봉을 버립니다.

**4** 부착된 캡을 튜브에 끼웁니다. 검사 카트리지의 작은 구멍에 3방울을 부드럽게 짜냅니다. 카트리지를 평평한 표면에 15분 동안 그대로 둡니다.

**주의!** 결과를 표시하는 영역은 선이 나타나기 전 흰색으로 다시 바뀌기 이전에 빨간색으로 바뀝니다.

## 결과

**음성**  
C(조정) 표시에 한 줄이 있고,  
T(검사) 표시에 줄이 없습니다.

단일 음성 결과는 증상이 있는 사람의 코로나19를 배제하는 데 사용할 수 없습니다. 48시간 후에 검사를 반복합니다. 밀접 접촉자인 경우 이 검사를 사용해서는 안 되며, 공중 보건 검사의 지침을 따라야 합니다.

**양성**  
C(조정) 표시에 한 줄이 있고,  
T(검사) 표시에 한 줄이 있습니다.

**반드시 다음을 따라야 합니다.**

- 즉시 격리 조치를 합니다.
- 이름, 생년월일, 보건 카드 번호 및 연락처를 포함한 이메일을 [PublicHealthPOCT@nshealth.ca](mailto:PublicHealthPOCT@nshealth.ca)로 보내 양성 결과를 보건 기관에 통보합니다 (주의: 본 이메일 계정은 양성 결과 통보만 받습니다).
- <https://covid-self-assessment.novascotia.ca/en> 또는 811을 통해 코로나19 검사를 예약합니다.
- 음성 확정 결과를 받거나 보건 기관에서 전화로 자세한 정보를 받기까지는 격리 조치를 계속합니다.

**무효:** 검사 결과가 음성 또는 양성의 예와 정확히 일치하지 않으며, 새 키트로 검사를 다시 해야 합니다.